

「やりたい」を  
「できる」に変えよう。

## 歩行車 リトルターン II 歩行車 リトルターン II KM

## LITTLE TURN II

### 3WAYキャスターを搭載した 新しいリトルターンがラインナップ追加!

スタンダード  
タイプ



リトルターン II

買い物  
タイプ



リトルターン II KM

※製品にかごは付属しません。

#### 買い物かごが 載せられる!

手元に買い物かごがある  
ので出し入れ簡単!  
買い物かごを縦置きにして、  
製品をコンパクトに。



買い物かご受け部(ホルダー)  
を上げると、足元ひろびろ。

### 共通特長

誰でも使える! **New**

#### 調節幅の広いハンドル

製品はコンパクトなまま、ハンドルの高さは74~96.5cm  
(10段階設定)まで調節できます。  
1台で幅広い方にお勧めできます。

74cm



96.5cm



身長145~185cm(目安)の方まで対応

どこでも使える! **New**

#### 3WAYキャスター

利用者の歩行能力や路面の状況に応じて、**タイヤの首振り設定が3種類**から選べます。また歩行能力の変化によって設定しなおすことと、**長く愛用して頂けます。**

360°



360

左右45°



45

固定(直進)



直進

安定

歩行能力

不安

舗装されている

路面状況

凹凸が多い

前輪回転制御レバーを上下にスライド  
することで首振りの切替ができます。



持ち上げやすい New

## 楽しくグリップ

楽しくグリップを持つことで、歩行車の前輪が持ち上がり、段差の乗り越えや方向転換などが容易になります。



段差の乗り越え

方向転換

## コンパクト設計

## 左右折りたたみ

リトルターンⅡは製品幅48cm、リトルターンⅡ KMは製品幅50cmと業界最小クラスで取り回しがしやすい。また左右折りたたみで、コンパクトになり、玄関などにも収納できます。



廊下や狭い居室空間での使用にぴったりです。

折りたたんだ後も自立します。

座って一休みもできます。  
※リトルターンⅡ KMに着座の際は、買い物かご保持ベルトにもたれかけることはできません。

## 簡易保冷バッグ (リトルターンⅡ KMのみ)

スーパーで購入したものを、そのままバッグに入れて持ち帰ることができます。

※簡易保冷バッグなので生鮮品を長時間入れたままにはしないでください。




バッグ容量  
大容量11L


※リトルターンⅡは12L

## 寸法図 (単位: cm)

リトルターンⅡ

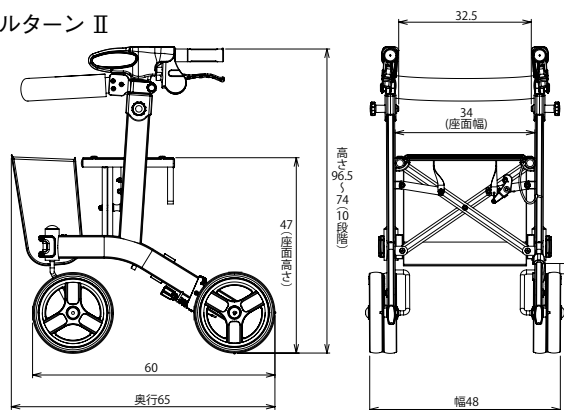

リトルターンⅡ KM

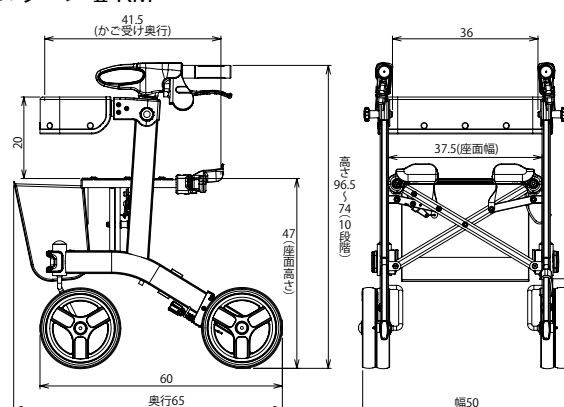

## 歩行車 リトルターンⅡ 福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与対象品

| タイプ     | リトルターンⅡ                                                          | リトルターンⅡ KM             |
|---------|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 商品コード   | 532295                                                           | 532296                 |
| 価格      | 65,000円<br>(税込71,500円)                                           | 70,000円<br>(税込77,000円) |
| カラー     | ワインレッド                                                           |                        |
| 商品サイズ   | 幅48×奥行65×高さ74～96.5cm                                             | 幅50×奥行65×高さ74～96.5cm   |
| 商品重量    | 約6.9kg                                                           | 約7.5kg                 |
| 材質      | (座面) ポリエステル<br>(フレーム) アルミニウム<br>(ハンドルグリップ) エラストマー<br>(タイヤ) EVA樹脂 |                        |
| バッグ積載容量 | 6kg未満                                                            |                        |
| 梱包入数    | 1                                                                |                        |
| JAN     | 098141                                                           | 098158                 |
| TAIS    | 000713                                                           | 000714                 |

JANコードの国名およびメーカーコードを表わす49-70210は共通です。

TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

YouTube

X (旧Twitter)

Instagram



公式チャンネル  
アロン化成【安寿】



@aron\_anjyu



@aron\_anjyu

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～16:00 (12:00～13:00はのぞく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- 個人情報情報は適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■ お問い合わせは…