

本製品はアロン化成製のポータブルトイレ専用のフィルムカセットです。
ご利用前に必ず本書とトイレ本体の取扱説明書をお読みください。
本書に記載した内容はYouTubeでもご覧いただけます。



▶動画をチェック



4 970210 862520

安全上のご注意

必ずお守りください

ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他人への危害を未然に防止するためのものです。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



警告

誤った使いかたをすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

電源プラグを差した状態でトイレの中に手を入れないこと

ローラーや圧着ゴムに手をはさまれて、けがや火傷の原因になります。
また、通電している部分に触れ、感電やショートの原因になります。




注意

誤った使いかたをすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

フィルムカセットのふたや容器を水、洗剤、アルコールなど液体でお手入れしないこと

ふたや容器が変形したり、カビの原因になります。

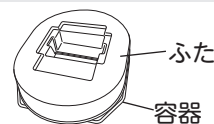

※ふた、容器は材質（紙）の特性上、表面にシワ、細かな割れ目（クラック）、端面にバリが生じる場合がありますが、問題なくご使用いただけます。
本書では家具調トイレセレクトR自動ラップを代表例として用いてご説明します。
他機種の場合も作業する内容や手順は同じです。

交換方法

※ご使用中のフィルムに「STOP」マークが出たら、フィルムカセットの交換が必要です。
「STOP」マークが出てから約8回お使いいただけますが、早めの交換をおすすめします。

1. リモコンのフィルム送りボタンを押し、残ったフィルムを出し切ります

フィルム送りボタンを押している間、フィルムが送り出されます。
20cm 送り出されると自動で停止します。フィルムがなくなるまで繰り返しフィルム送り操作をしてください。



フィルム送り
ボタン


2. 電源プラグをコンセントから抜いてください

警告



電源プラグを差した状態でトイレの中に手を入れないこと


ローラーや圧着ゴムに手をはさまれて、けがや火傷の原因になります。
また、通電している部分に触れ、感電やショートの原因になります。

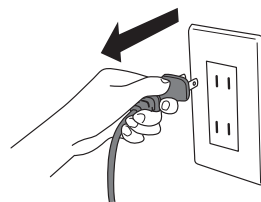

3. 受け板ごと、便座と止水カバーをはずします


便座の裏や止水カバー、受け板が汚れている場合は、トイレ本体の取扱説明書の「お掃除のしかた」を参考に汚れを拭き取ってください。

※止水カバーは受け板と便座の間に入っています。

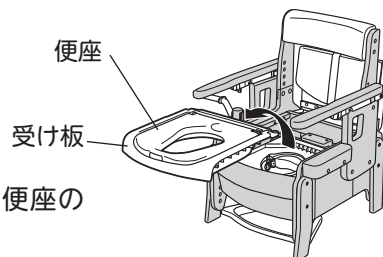

4. 空になったフィルムカセットの容器を抜き取ります

空になったフィルムカセットの容器は紙製のため簡単にちぎって小さくでき、可燃物として処分することができます。
※お住まいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

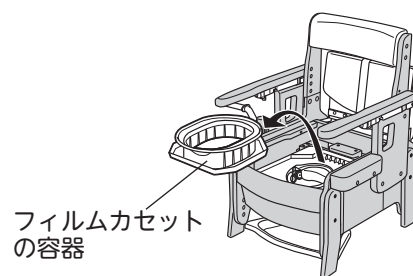

5. ヒーター表面の汚れを拭き取ります



- ①フィルムカセットにテープで貼付されているクロスを取り外します。
- ②ラップユニット内のフィルムサポート(白色の部品)を奥側に向かって押し、ヒーター(銀色の部品)を露出させ、クロスでヒーター表面の汚れを拭き取ります。



注意


ヒーターの汚れをクロスで拭き取る際は、ヒーター部分の温度に注意すること

ラップ動作直後にはヒーター部分が高温になっている場合があります。

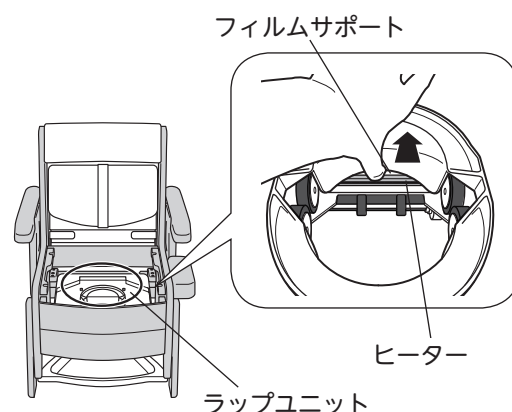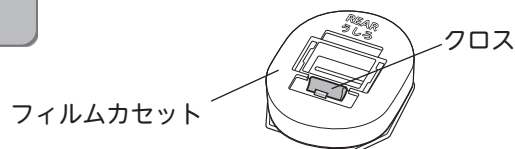

6. フィルムカセットをラップユニット天面にのせます


図のように、「うしろ」の表示を背もたれ側にしてセットします。
フィルムカセットが傾いたり、浮いたりせず、フィルムカセットの底面の六角形が、ラップユニットの六角形の溝におさまっていることを確認してください。

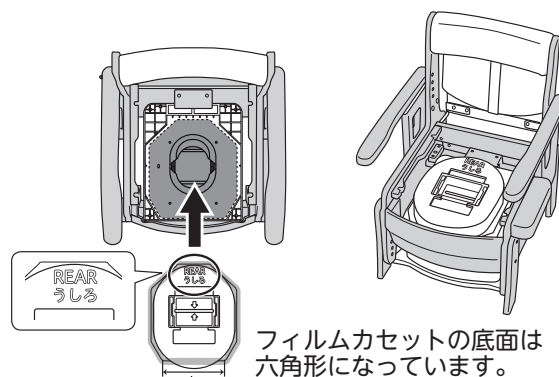

底面の長い部分が手前になるように設置します



7. フィルムセッターを使用してフィルムのセットをします

- ①フィルムセッターを図のような状態にします。

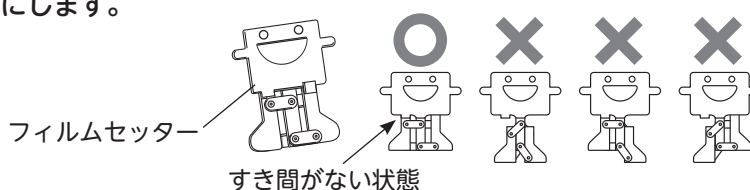


- ②フィルムセッターをフィルムカセット中央のすき間に差し込んでください。



※フィルムセッターの突起部が、フィルムカセットに接触するまで差し込んでください。

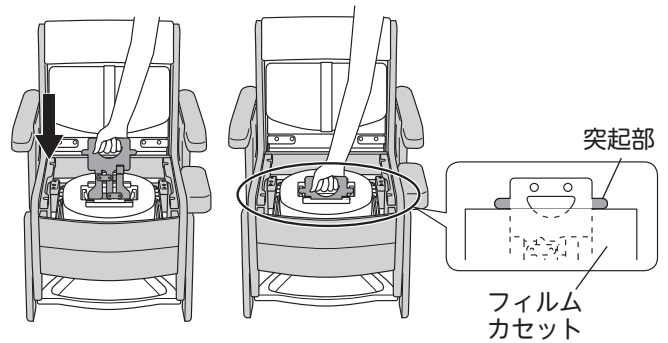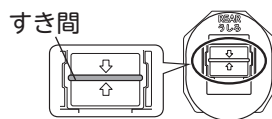

- ③フィルムセッターを垂直に抜きます。

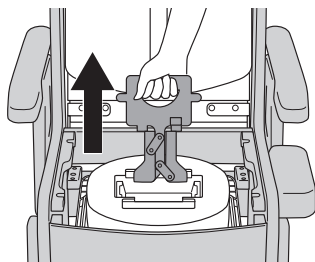


- ④フィルムカセット両側部にある赤色の線が入ったテープをきちんとはがし、ふたを真上に持ち上げて外します。

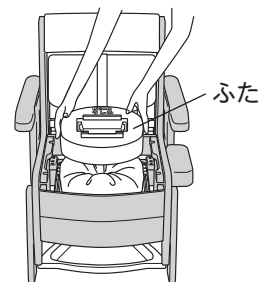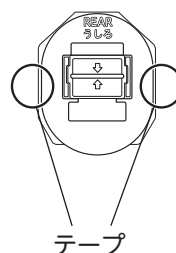

- ⑤フィルムが左右のローラーに挟まれていることを確認してください。

フィルムが左右のローラーに挟まれていないと正常にラップされなくなる原因になります。


※フィルムがローラーに挟まれていない場合は「交換方法」7. ①からやり直してください。

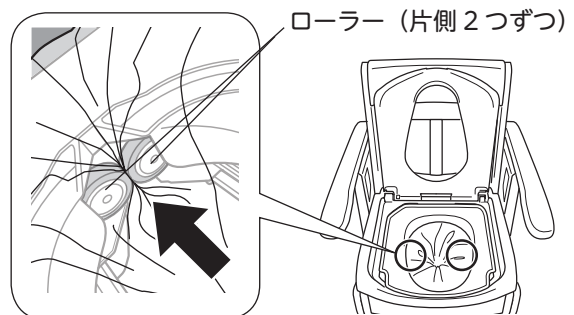

8. 受け板ごと、便座と止水カバーを戻し、正しく取りついているか確認します


- ①受け板ごと便座と止水カバーを戻します。受け板を戻したら、便座を上から押して、ガタツキがないことを確認してください。

※止水カバーは受け板と便座の間に入っています。

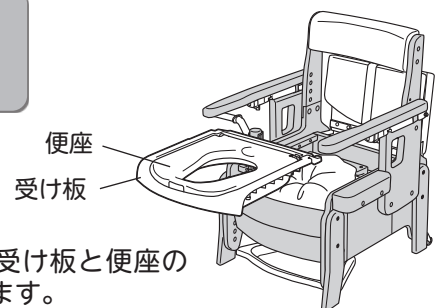


- ②便座を上げて、止水カバーが以下の状態になっていることを確認してください。

・凸部と凹部の位置が合っていること

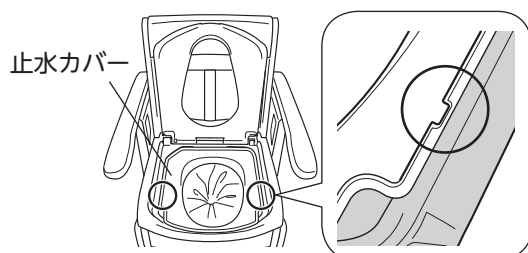


・止水カバー開口部がフィルムカセットの内側にあること

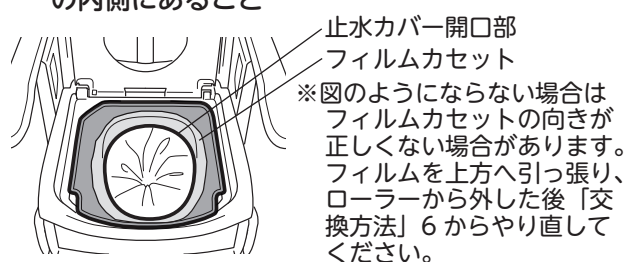

9. 電源プラグをコンセントに差し込み、リモコンの電源ランプが点灯していることを確認してください


正常に電源が入ると、リモコンの電源ランプが緑色に点灯し、「ピッピッ」という案内音が鳴ります。

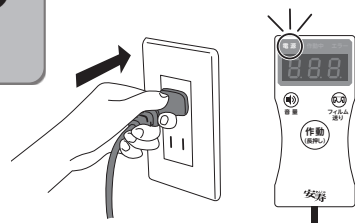

10. リモコンの作動ボタンを押し、ラップ動作の初期設定をします

作動スイッチを約1秒押すと、作動中ランプが緑色に点灯し、ラップ動作の初期設定がされます。初期設定には約90秒かかり表示画面にはラップ終了までの目安時間が表示されます。

*終了時には「ピッピッ」という案内音が鳴り、リモコンの作動中ランプが消灯します。

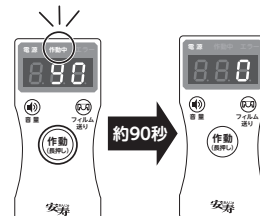

注意



ラップ動作の初期設定が終了するまでフィルムに触れないこと

正しく動作せず、ラップされないために汚物がもれて製品故障の原因になります。

11. 初期設定で切り離されたフィルムを取り出します


①初期設定が終了し、リモコンの作動中ランプが消灯したことを確認したら、切り離されたフィルムを取り出してください。

②取り出したフィルムの上下の圧着部が平行になっているか確認してください。


圧着部の片方が斜めになっている場合はフィルムカセットがローラーに正しく挟まっていない恐れがあります。

*フィルムが片寄っている場合は「交換方法」7.①からやり直してください


③ラップ受けトレイを元の位置に戻して完了です。

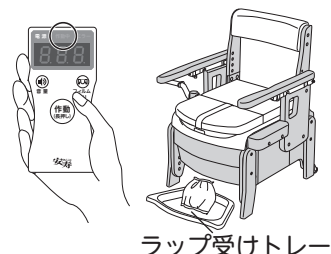

ラップ受けトレイ

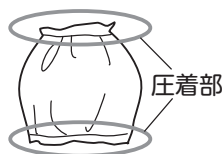

OK：圧着部が平行

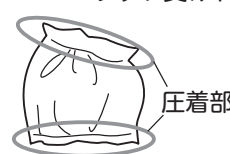

NG：圧着部の片方が斜め

注意



フィルムカセットを装着した状態でキャスターを使った移動など、トイレを傾けたときは使用前にフィルムカセットが正しくセットされているか確認すること

トイレを傾けるとフィルムカセットがずれてしまう場合があり、正常にフィルムがラップされなくなる原因になります。

●ご使用前に以下のことを確認してください。

- ・フィルムがローラーに挟まっていること → 詳しくは「交換方法」7.⑤をご確認ください。
- ・受け板がトイレ本体にガタツキなくはまっていること → 詳しくは「交換方法」8.①をご確認ください。
- ・止水カバーの位置が正しいこと → 詳しくは「交換方法」8.②をご確認ください。

品質表示

材 質	フィルム：(原料樹脂) ポリエチレン	容器・ふた：紙
寸 法	フィルム長さ：20m (約60回分)	
	フィルム厚さ：0.03mm	
重 量	920g	

廃棄上のご注意

お住まいの地域の分別ルールに従って廃棄してください。

●製品の仕様および価格は、予告なく変更する場合があります

製造・発売元

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00 (12:00～13:00はのぞく)

- ・お客様から頂いたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
- ・個人情報は適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

URL <https://www.aronkasei.co.jp/>

安寿

検索