

安 あんじゅ 寿

軽量浴槽台

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

スッと持ち上げ、サッと水キレ

軽くて持ちやすいから出し入れ楽らく



あしびた
シリーズ



ARONKASEI CO., LTD.

出し入れ、
お手入れ、
楽しく。

出し入れが
楽になる

3つのポイント

1 浴槽台[※]で 最軽量クラス 2.0kg~


今までよりも軽量になったので高齢者や女性でも持ち上げが楽になり、出し入れの負担が軽減します。

※自重で洗めるタイプ

2 楽に取り出しできる 持ち手



握りやすい持ち手で、浴槽台を取り出す場面でも片手でしっかり浴槽台をつかめるので、楽に取り出せます。

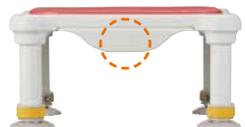

両手で持ち上げると水の抵抗が大きく重い。



水の抵抗を小さくするためにななめにすると持ちにくくすべりやすい。



持ち手があるので、片手で楽に取り出しができます。

3 水切れのよい貫通構造



浴槽から取り出したときの水切れがよく、水中へ沈めるときも空気が抜けやすくするために、天板と脚ゴムに水抜き穴を設けました。抵抗が少なくスムーズな出し入れができます。



軽量浴槽台で
普段の出し入れ、
お手入れが
楽になりました。



浴槽から
出し入れするときに
重くて大変…。



つかむところが
なくて片手で
持ちにくい…。

浴槽台を脱衣所に
保管したいけど
浴槽台から水が
ポタポタとたれて、
床が濡れる…。




軽くて持ち上げる
負担が少ない。



持ち手があって
濡れていても滑らず
片手で安心して
出し入れできる。

短時間で
水切りできるから
脱衣所に
保管しやすい。

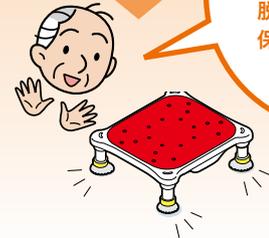

楽しく高さ調節

幅広い調節範囲

●12-20タイプ



12~20cm
(5段階)
2cmピッチ

●16-26タイプ



16~26cm
(6段階)
2cmピッチ

簡単調節方法

1か所で調節できる

調節部分の固定箇所が1か所のため、
少ない作業数で高さ調節できます。



D型パイプ構造

D形状の
パイプで上下方
向のみに動き
を制限でき、パ
イプをスライド
したときに高
さ調節の穴位
置がわかりや
すい形状です。



楽しくお手入れ

着脱しやすい天板

天板を外しやすくするため天板と本体の
間に指かり部分を設けました。※短辺側



パイプ内のお手入れ

脚ゴム底面に大きな水抜き穴がある
ため、分解せずに固定ピンを外すだ
けでパイプ内をお手入れできます。



速乾構造

脚部の貫通構造
パイプ内の水切れ、風通
しが良い貫通構造です。

立てかけ保管構造
本体を安定して立てかけ
て置くことができ、カビ
やすい部品も乾かしやす
くしています。




防カビ加工 &
クリーン構造

防カビ
SIAA

SIAA
防カビ加工

横すべりを防止する独自の脚ゴム

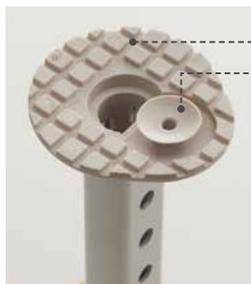

すべり止めゴム
吸盤

あしびた

格子状のすべり止めゴムと
吸盤のダブル効果で、横す
べりをしっかり防止します。

お風呂に入るときにふみ込
んでもしっかりとグリップ
が効いて横すべりを防止し
ます。



用途にあわせて選べる座面タイプ

すべり止めシートタイプ



すべりにくい、エラ
ストマーで加工した
天板です。



踏み台として使用する際に安心

ソフトクッションタイプ



やわらかい、EVA
クッションを採用し
ています。
※天板から取り外し可能



ソフトクッションがおしりにやさしい

軽量浴槽台

天板サイズ	天板タイプ	品名	カラー	商品コード	商品サイズ	商品重量	材質	梱包入数	JAN	TAIS	価格
ジャスト	すべり止め	ジャスト 12-20	レッド ブルー グリーン	536-550 536-551 536-552	幅36×奥行33×高さ12~20cm	2.3kg	(天板) ポリプロピレン※1 (ソフトクッション) EVA樹脂※2 (本体・スライド支柱) アルミニウム (脚ゴム) エラストマー※3/ ポリプロピレン	2	012741 012758 012772	000560	18,500円 (税抜)
		ジャスト 16-26	レッド ブルー グリーン	536-555 536-556 536-557	幅36×奥行33×高さ16~26cm	2.4kg		2	012789 012796 012802	000561	18,500円 (税抜)
	ソフトクッション	ジャストソフト 12-20	レッド ブルー グリーン	536-560 536-561 536-562	幅36×奥行33×高さ12~20cm	2.5kg		2	012819 012826 012833	000562	19,500円 (税抜)
		ジャストソフト 16-26	レッド ブルー グリーン	536-565 536-566 536-567	幅36×奥行33×高さ16~26cm	2.6kg		2	012840 012857 012864	000563	19,500円 (税抜)
ミニ	すべり止め	ミニ 12-20	レッド ブルー グリーン	536-570 536-571 536-572	幅33×奥行27×高さ12~20cm	2.0kg	※1 すべり止めシート表面は エラストマー ※2 ソフトタイプのみです ※3 防カビ加工	2	012871 012888 012895	000564	18,500円 (税抜)
		ミニ 16-26	レッド ブルー グリーン	536-575 536-576 536-577	幅33×奥行27×高さ16~26cm	2.1kg		2	012901 012918 012925	000565	18,500円 (税抜)
	ソフトクッション	ミニソフト 12-20	レッド ブルー グリーン	536-580 536-581 536-582	幅33×奥行27×高さ12~20cm	2.3kg		2	012932 012963 012970	000566	19,500円 (税抜)
		ミニソフト 16-26	レッド ブルー グリーン	536-585 536-586 536-587	幅33×奥行27×高さ16~26cm	2.4kg		2	013007 013014 013038	000567	19,500円 (税抜)

JANコードの国名およびメーカーコードを表わす49-70210は共通です。
TAISコードのメーカーコードを表わす00221は共通です。



浴槽内・洗い場兼用

組立完成品

最大使用者体重 100kg

特定福祉用具 / 特定介護予防福祉用具

ジャストソフト/ミニソフト

ジャストすべり止め/ミニすべり止め

〔カラーバリエーション〕

レッド ブルー グリーン

〔商品寸法図〕 単位:cm

〔ジャスト〕

幅36 奥行33

〔ミニ〕

幅33 奥行27

〔ジャスト/ミニ 12-20〕
12・14・16・18・20(5段階)
〔ジャスト/ミニ 16-26〕
16・18・20・22・24・26(6段階)



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
 大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100
 名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011
 福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

●記載価格はメーカー希望小売価格です。
 ●商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
 ●製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00(12:00～13:00はのぞく)

■お問い合わせは…