

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

AT-C伸縮手すりシリーズに65～80cmの伸縮手すりが追加ラインナップ!

ポーチ部や玄関への設置に

NEW

E800

階段の踏面に置ける
玄関先が公道になっている
戸建に最適

NEW



E800-S

両側手すりタイプ

両側手すりタイプ

この伸縮シリーズラインナップ追加で、需要が多い
65～105cmの幅広い調節が可能となります。

手すりの長さや上下左右に角度の変更が可能
なので、使いやすい場所にベースプレートを
ズラして設置できます。

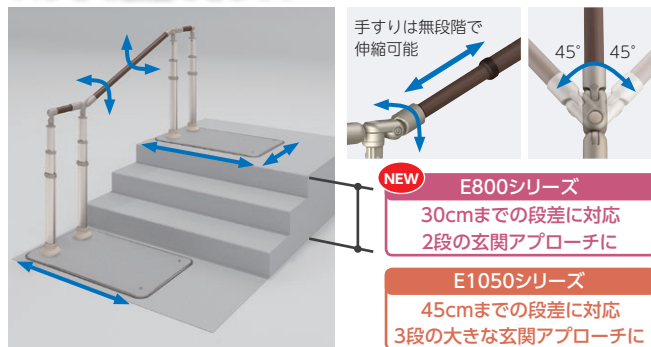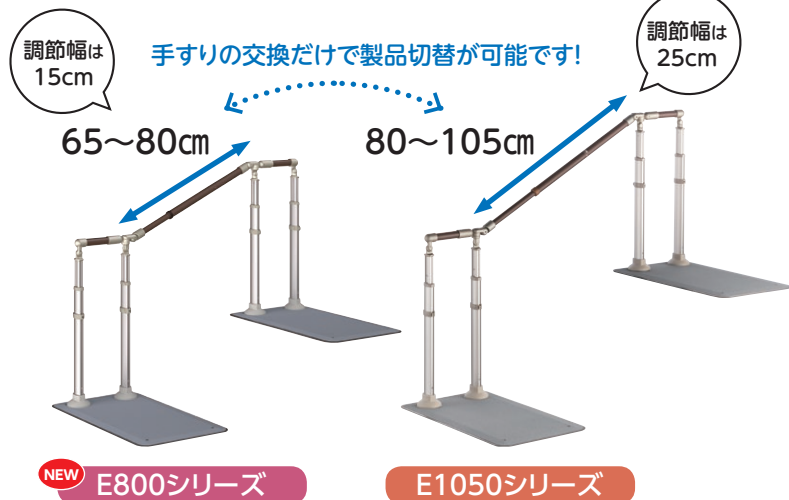

強力な滑り止めシート



雨の日でも滑りにくいベースプレートを採用し、利用者が安心して使用できます。

設置も簡単!



調整後、六角レンチで締め付けるだけ(2か所)で調節完了。

交換部品 共有部品が多いので在庫リスクを軽減できます！

	AT-C 共通支柱セット	AT-C用 S支柱セット	AT-C 共通ベースプレート	AT-C用 ベースプレート W940	AT-C-E800-S 手すりセット(キャップ付き)	AT-C-E1050-S 手すりセットR(キャップ付き)	AT-C-E1050-S <手すり支柱セット>	AT-C-E1050 <手すり支柱セット>
部品								
価格(税抜)	48,000円	30,000円	85,000円	85,000円	40,000円	40,000円	110,000円	125,000円
商品コード	592-395	592-390	592-220	592-388	592-397	592-299	592-387	592-257
JAN	02701-1	02528-4	85705-2	02525-3	02705-9	03242-8	02524-6	00771-6
詳細	短手すり・2本支柱、六角レンチ	階段タイプ用1本支柱、六角レンチ	ベースプレート1枚	ベースプレート1枚	階段タイプ用伸縮手すり、キャップ、六角レンチ2.5mm	階段タイプ用伸縮手すり、キャップ、六角レンチ2.5mm	階段タイプ用伸縮手すり、キャップ、六角レンチ、階段タイプ用1本支柱、短手すり・2本支柱	階段タイプ用伸縮手すり、キャップ、六角レンチ、短手すり・2本支柱

NEW

	AT-C-E800	AT-C-E800T	AT-C-E800-S	AT-C-E800T-S	AT-C-E1050	AT-C-E1050T	AT-C-E1050-S	AT-C-E1050T-S
価格(税抜)	245,000円	370,000円	230,000円	330,000円	245,000円	370,000円	230,000円	330,000円
商品コード	870-162	870-163	870-164	870-165	870-150	870-151	870-160	870-161
TAIS	000573	000574	000575	000576	000553	000554	000568	000569
JAN	02694-6	02696-0	02697-7	02698-4	00756-3	00757-0	02522-2	02523-9
重量	約38kg	約47kg	約32kg	約39kg	約39kg	約48kg	約34kg	約40kg
接続部の手すり長さ	65~80cm	65~80cm	65~80cm	65~80cm	80~105cm	80~105cm	80~105cm	80~105cm
材質	(手すり)半硬質塩化ビニル樹脂/アルミニウム、(外支柱、スライド支柱)アルミニウム (ベースプレート、固定プレート)ステンレス、(各支柱ブラケット)アルミニウム合金							

※JANコードの国名およびメーカーコードを表す49-70210は共通です。
TAISコードのメーカーコードを表す00221は共通です。

最大使用者体重 100kg


福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与対象品

商品寸法図

単位: cm


E800/E1050

(E800) 65~80
(E1050) 80~105

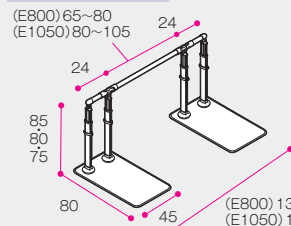

E800T/E1050T


55(有効幅)

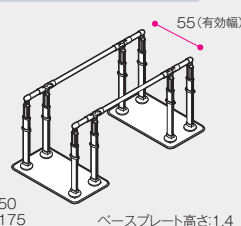

ベースプレート高さ: 1.4


E800-S/E1050-S

(E800-S) 65~80
(E1050-S) 80~105

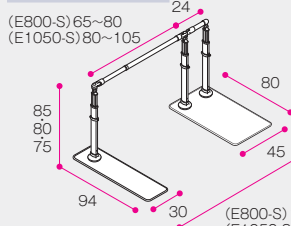

E800T-S/E1050T-S

55(有効幅)

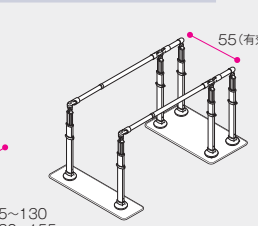


ベースプレート高さ: 1.4

※手すりφ3.4、
E800/E800-S/E1050/E1050-Sの細手すりはφ3
E800/E800-S/E1050/E1050-Sの太手すりはφ3.6

設置条件


●平坦な場所に設置する場合 ※斜面に設置しないでください。

①ベースプレートとの距離寸法

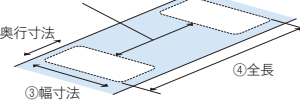


●段差のある場所に設置する場合

①ベースプレートとの距離寸法

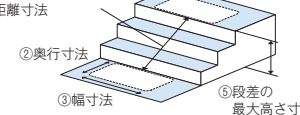


●段差のある場所に設置する場合 (E800-S/E800T-S/E1050-S/E1050T-S)

①ベースプレートとの距離寸法

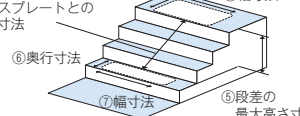

①	(E800/E800T) 45~60cm 目安 (E800-S/E800T-S) 40~55cm 目安 (E1050/E1050T) 60~85cm 目安 (E1050-S/E1050T-S) 55~80cm 目安
②	45cm 以上
③	80cm 以上
④	(E800/E800T) 135~150cm以上 (E800-S/E800T-S) 115~130cm以上 (E1050/E1050T) 150~175cm以上 (E1050-S/E1050T-S) 130~155cm以上
⑤	(E800/E800T) 30cm以下 (E800-S/E800T-S) 30cm以下 (E1050/E1050T) 45cm以下 (E1050-S/E1050T-S) 45cm以下
⑥	30cm以上
⑦	94cm以上

・手すりの左右角度は45°以内に納まるように設置してください。
・各ベースプレートは平行になるように設置してください。

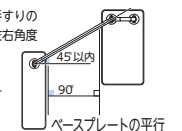


・手すりの上下角度は45°以内に納まるように設置してください。
・手すり角度を調節した後、上下角度固定ボルトを2ヶ所固定してから使用してください。



共通

ベースプレートよりも小さい縁石や凹凸が大きい床面、芝生、滑りやすい床面の上には設置できません。

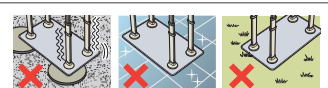

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7101
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)796-8040
福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

●記載価格はメーカー希望小売価格です。
●商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
●製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**
(受付時間) 祝祭日以外の月~金 9:00~17:00(12:00~13:00はのぞく)

●お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただいております。
●個人情報情報は適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

■お問い合わせは…