

「やりたい」を
「できる」に変えよう。


AT-E series
AT-E-360 / 360F

玄関にぴったりの落ち着きあるデザイン 玄関にすぐ置けるコンパクト手すり




オプション

オプションの踏み台を取り付けることで
かまちの段差が高い場合に昇降を補助できます。

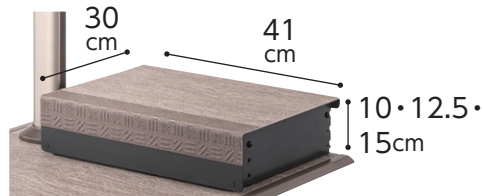

踏み台を使用する際は手
すりの角度を変えると、よ
り昇降しやすくなります。

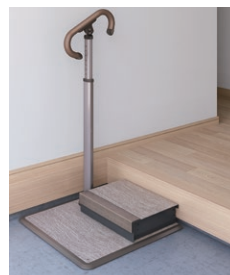

POINT 1 こだわりのコンパクトサイズ


■コンパクトなプレート

60×60cmを採用しました。狭い
玄関が多い集合住宅では、65cm
以下でないと設置/納入は非常に
困難です。また**踏み込みスペース
を作り安定して**使用できるよう奥
行も60cmになっています。



■すっきりとした1本支柱

支柱を1本にすることで、玄関脇
の下駄箱が観音開きの場合でも
邪魔になりません。

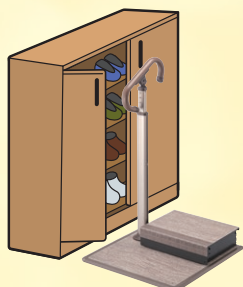

POINT 2 どこからでも握りやすい手すり

■楕円形の手すり

滑りにくく、**片手や両手でしっかりと握ることができます。**



■手すりの高さ

高さが80～102.5cmま
で調整できます。**体の近く
に手すり**がくるので、安心
してお使いいただけます。

※傾斜手すりの場合：
85～107.5cm



POINT 3 手すりの角度調整ができます



■水平仕様が便利の場合

上がりかまちの段差がない場合は、立位保持や立ち座りのために水平仕様水平仕様がオススメです。

■傾斜仕様が便利の場合

上がりかまちの段差がある場合は、昇降動作のために傾斜仕様がオススメです。


屋内使用専用		
		
	AT-E-360	AT-E-360F
価格	89,000 円 (税込 97,900 円)	112,000 円 (税込 123,200 円)
商品コード	870-135	870-136
JAN(4970210)	250457	250464
TAIS(00221)	000734	000735
入数	1	1
材質	(手すり) 半硬質塩化ビニル樹脂 / アルミニウム (支柱・手すり受け金具・手すり受け軸) アルミニウム (各樹脂パーツ) ASA 樹脂 (ベースプレート) スチール (端面保護カバー、保護マット) 塩化ビニル樹脂 (踏み台) スチール	
重量	約 16.6kg	約 21.6kg

POINT 4 濡れても簡単に拭き取れます


マンションの廊下などに使われる塩ビ製マットなので、汚れも付きにくく、水にぬれても使用することができます。



濡れても簡単に拭き取れ、
汚れも付きにくい

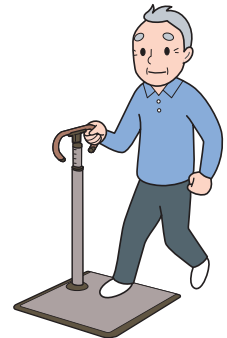

踏み込んで滑らず
素足でも痛くない

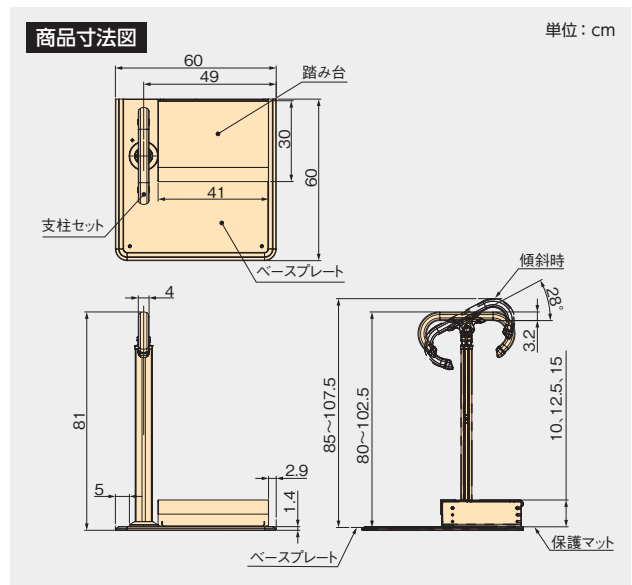


			
	AT-E-360 ベースプレート	AT-E-360 踏み台	AT-E-360 支柱セット
価格	52,000 円 (税込 57,200 円)	23,000 円 (税込 25,300 円)	37,000 円 (税込 40,700 円)
商品コード	530-030	530-031	530-032
JAN(4970210)	250471	250488	250495
TAIS	000736	000738	000737
入数	1	1	1

SIAA
ISO 21702
抗ウイルス加工
※手すり持ち手部分

福祉用具貸与
介護予防福祉用具貸与対象品
最大使用者体重 100kg

注意事項

- 壁あるいは下駄箱と手すりの隙間が12cm未満になるように設置してください。
- 段差が12cmを超える場合は、踏み台を使用してください。

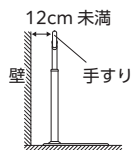

アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階



公式チャンネル
アロン化成【安寿】



@aron_anjyu



@aron_anjyu

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル **0120-86-7735**

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただきます。
- 個人情報情報は適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■お問い合わせは…