

「やりたい」を
「できる」に変えよう。

行きたい場所へ思いのままに。
世界が広がる「軽さ」です。

歩行車
最軽量
クラスの
驚きの
4.1kg

幅広
53cm



歩行車で
こんな困りごと
ありませんか？



重くて段差の
乗り越えが大変。



折りたたみ時に
かむ必要があり、足腰が
つらい。



駐車ロックの
方法が
難しい。

イコットエアMなら ▼ 解決できます！

超軽量
4.1kg


持ち上げられる！
段差乗り越え、車の中に入れる、
方向転換が容易に！



階段、ポーチ部などの移動時



楽らくグリップ

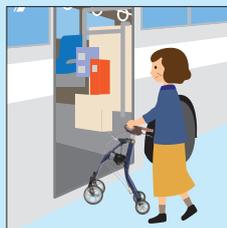

公共交通機関の利用時



車への積み込み時

「楽らくグリップ」を持つことで、
歩行車がバランスよく持ち上がり、
さらに軽く感じます。

カンタン

折りたたむための！
止められる！
シンプルで手元で
操作可能です！



止める

歩行車を操作しながらしっかり握れるブレーキレバー。後輪を動かさないようにする駐車ロックはブレーキレバーを下げるだけで行うことができます。



駐車ロック時

ブレーキレバー



折りたたむ

手元で操作できる折りたたみレバーでひざを大きく曲げずに片手で開閉動作を行うことができます。

幅広

軽いのに
安心して使える！
ゆったり幅広 53cm



横幅が53cmになったことにより、座面の幅も広がりました。男性の方でもゆったり座って頂けるように38cmになっています。



4.1kgと軽量ですが、アルミ素材や高強度樹脂を採用し、強度と軽量化を両立させています。

お出かけを 快適にする 8つのポイント

ちょっと一息 座面つき

歩くのに疲れたら座面に座って休憩できます。



男性でも
ゆったり
座れる

足元が見える メッシュタイプ

メッシュ状の座面で足元が確認しやすく、中に入れた荷物も忘れません。



小物入れに 座面バッグ

外出時の荷物入れに。バッグ容量：約2.5リットル



熱中症予防に
ペットボトルなどの
保管にも便利


お買い物もできる 袋フック

買い物の荷物が入った袋もフックに引っ掛けて歩くことができます。



体格にあわせて 高さ調節

歩きやすい高さにハンドルグリップを調節できます。ハンドル高さ：80~92.5cm (6段階)

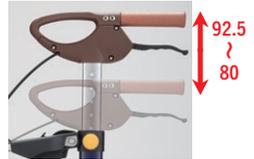

※一般的な歩行車よりも、ハンドルを高めに設定できます。

片手でセット 杖ホルダー

杖を歩行車にセットできます。立てかけるだけで固定できるので片手でハンドルを持ちながらセットできます。



折りたたみ時の簡単な 持ち上げ

折りたたみ時は座面パイプをつかむと軽く持ち上げることができ、車などへの出し入れも容易に行えます。




カンタンな 駐車ロック

イコットエアMの駐車ロックは軽い力でかけることができ、またロック解除の跳ね返りも気になりません。



〔寸法図〕

(単位: cm)

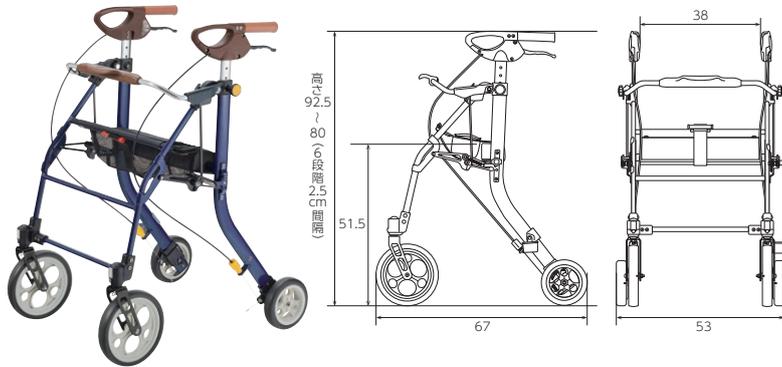

歩行車 イコットエア M

価格	58,000円(税込63,800円)
商品コード	532-340
商品サイズ	幅53×奥行67×高さ80~92.5cm(6段階) 座面高さ:51.5cm
商品重量	約4.1kg
バッグ載荷重	6kg未満(容量 約2.5L)
材質	(フレーム)アルミニウム (タイヤ)EVA樹脂 (ハンドルグリップ)エラストマー (座面バッグ)ポリエステル、ナイロン (折りたたみレバー、杖ホルダー上/下) ポリプロピレン
梱包入数	1
色調	ネイビー
J A N	49-70210-033791
T A I S	00221-000613

最大使用者体重 100kg

福祉用具貸与/
介護予防福祉用具貸与対象品



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011
福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

●記載価格はメーカー希望小売価格です。
●このカタログの商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
●製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 9:00~17:00(12:00~13:00はのそく)

■お問い合わせは…