

家具調トイレ AR-SA1 Light
シャワピタ


より小さく、
より軽く、
よりお求めやすく。



高機能なのに幅 54cm。
これならお部屋に置ける。

シャワー機能付きトイレでは最小クラスの本体幅54cm。
また、コンパクトになってもゆったり座れるひじ掛け内寸
42cmを確保しました。

Compact

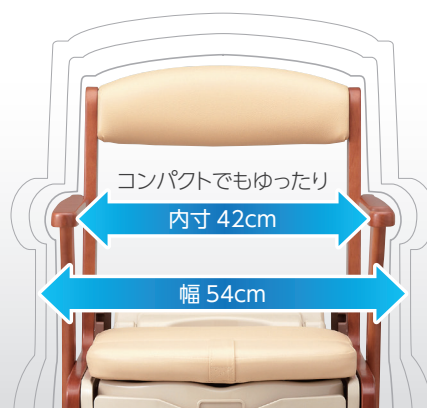

こんなに軽くなった 20kg。

構造のコンパクト化、シンプル化で、当社製品と比較して25%
以上(約7kg)軽量化を実現。取り扱いがしやすくなりました。

AR-SA1
約 27kg

Light

充実したユニット機能は
そのまま。

AR-SA1と同じシャワーユニットを採用

今までのシャワートイレは...



シャワーの位置が
うまく合わないこ
とが多いけれど、
座り直しをするの
は難しい...

左右
3段階



前後
5段階

シャワピタ機能で前後左右にシャワーノズルを調節できます。

座り直さなくても
おしりにシャワーが
ピッタリ合います!



充実機能で快適な排泄が行えます。



温水シャワー

しっかりと洗う
おしりシャワー



ワイド&ソフト
ビデシャワー



- 水勢調節5段階：0.5L/分～1.1L/分
- 水温調節3段階：35℃/38℃/40℃
- リズム洗浄機能：おしりの周辺と中心を交互に刺激。排便促進に効果的です。
- ムーブ洗浄機能：シャワーが前後にゆれ動き、しっかりと洗えます。



暖房便座

35℃、38℃、40℃の
3段階で調節できます。



脱臭

強力吸引で排泄中の
臭いをカットします。



温風乾燥


洗浄後のおしりを
乾かすことができます。



片手でも
扱いやすい
リモコン



商品寸法図 単位:cm

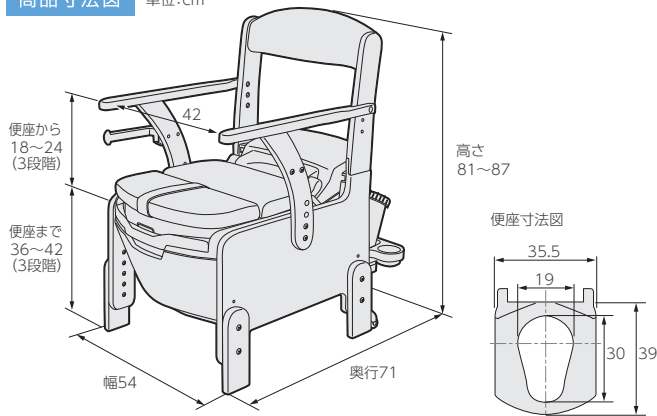

仕様

家具調トイレAR-SA1 ライト <シャワピタ>ノーマル

商品コード 533-818

J A N 49-70210-84945-3

梱包入数 1

商品サイズ 幅54×奥行71×高さ81～87cm (ひじ掛け外寸50cm)
便座面高さ36・39・42cm

商品重量 約20kg

材質 本体、補高脚、ひじ掛け：天然木(ラバーウッド)
背もたれ、折れ座面：合成皮革、ウレタンフォーム
温水洗浄便座、バケツ、スライド受け板、汚水受け：ポリプロピレン
給水タンク：ポリエチレン

バケツ容量 10ℓ

タンク容量 5ℓ

梱包サイズ 幅74×奥行55×高さ88cm

梱包重量 約25kg

ユニット機能 シャワー機能：おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、マッサージ洗浄
シャワー水勢：5段階 500ml/分～1,100ml/分
シャワー温度：3段階 切 / 35℃、38℃、40℃
温風乾燥機能：5段階 約25℃～55℃
暖房便座：3段階 切 / 35℃、38℃、40℃
脱臭機能：99%脱臭
呼び出しブザー

付属品 ペーパーホルダー、リモコン用ストラップ、リモコン用乾電池(2本)、
リモコン接続コード、防臭消耗品、六角レンチ、アース線

組立完成品

最大使用者体重
100kg

特定福祉用具 / 特定介護予防福祉用具

108,000円(税抜)



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011
福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- このカタログの商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)

■お問い合わせは…