

あんじゅ
安寿

歩行車 リトルターン
抑速付

LITTLE TURN



歩行車に追いつけず
転倒したり...

坂道ではハンドルの
ブレーキをかけながら
慎重に...

歩行速度に応じて
自動ブレーキ！
急加速による転倒を防ぎます。



人気の「リトルターン」に新しい仲間が増えました！
製品幅50cm！最小クラスの抑速ブレーキ付き歩行車

ARONKASEI CO., LTD.



LITTLE TURN

コンパクトで小回りの良い 本体設計

コンパクト 幅**50cm**

抑速ブレーキ付の
歩行車で最小クラス。

最小回転幅 **約80cm**

狭い空間でも扱いやすい
小回りの良い本体設計。

本体幅、ホイールベース（前輪と後輪の間の長さ）が小さいので小回りがききます。




急加速時に抑速ブレーキが作動して転倒防止します！

一般的な歩行車

坂道ではハンドルのブレーキをかけながら慎重に歩く必要がありました。



利用者によっては歩行車に追いつけずに転倒してしまうこともありました。

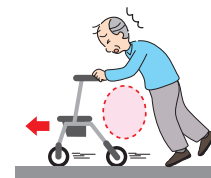

抑速ブレーキタイプ

自動的に抑速ブレーキが作動して加速を抑えるので安心して歩行ができます。



急加速時に抑速ブレーキが作動して転倒を予防します。




ブレーキ強さ 3段階

抑速ブレーキの力は3段階に調節可能。



〔商品寸法図〕

(単位: cm)

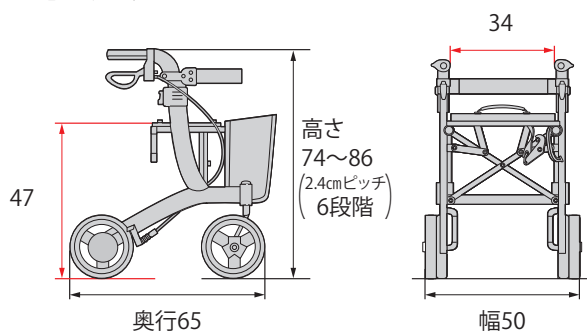

歩行車 リトルターン 抑速付

価 格	72,000円(税抜)
商品コード	532-323
商品サイズ	幅50×奥行65×高さ74~86cm 座面高: 47cm 折りたたみ幅: 28cm
商品重量	約8.5kg
材 質	(座面・バッグ) ポリエステル (フレーム) アルミニウム (ハンドルグリップ) エラストマー樹脂 (タイヤ) 前輪: EVA 樹脂、後輪: 合成ゴム
梱包入数	1
バッグ載荷重	5kg未満(容量約12リットル)
座面耐荷重	100kg
色 調	ワインレッド
J A N	49-70210-00463-0

※付属品: 六角レンチ(抑速ブレーキ調整用)

最大使用者体重 100kg

福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与対象品



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100
名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011
福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

●記載価格はメーカー希望小売価格です。
●商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
●製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735

(受付時間) 祝祭日以外の月~金 9:00~17:00(12:00~13:00はのぞく)

■お問い合わせは…