

安^{あんじゆ}寿

家具調トイレ セレクトR^{シリーズ}

今度のセレクトはきれいで好き。



ARONKASEI CO., LTD.



お手入れしやすくなった家具調トイレ


汚れやすい部分をプラスチックにして掃除がしやすくなりました。

Before もう少しお手入れをラクにしたい…



便座周りの木部についた尿はしみ込んで臭いが発生します。一度ついた臭いはなかなか取ることができません。

臭いが
気になる

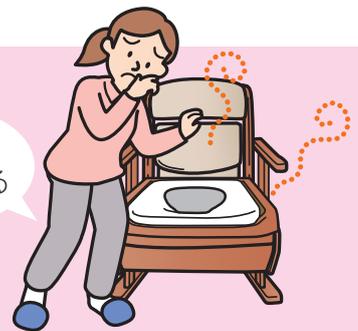

After 汚れやすい部分をプラスチックで覆いました。

受け板

汚水受け



汚れやすい部分はプラスチックで覆われ、尿がついてもきれいに拭き取れます。

受け板部は前方に段差があり、こぼれた尿が木部につきにくい構造になっています。



使う方の状況にあわせて“セレクト”

ポータブルトイレは「ご利用者の身体状況・住環境」に適したものを選ぶことで、安全・安心に使用できます。

select ひじ掛け

移乗方法にあわせて
選択できるひじ掛け

ノーマル ひじ掛けタイプ



立位移乗に適した、標準的な固定式ひじ掛け。



はねあげ ひじ掛けタイプ



座位移乗に適した、はね上げ式ひじ掛け。



select 本体幅

体格にあわせて
選択できる本体幅

省スペース 標準幅タイプ

ノーマルは幅50cm、
はねあげは幅54cm
とコンパクトなので
お部屋を広く使えます。




ゆったり排泄 ワイドタイプ


標準+6cmで
ゆったり座れます。
座幅に余裕があるこ
とで、移乗時の動きが
スムーズになります。



省スペースを最優先させたい方には「コンパクト」タイプがおすすめ

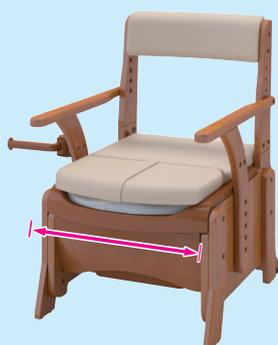

全幅48cmのコンパクト設計

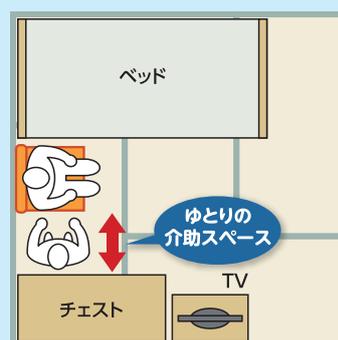

4畳半などのスペースに余裕がないお部屋でも動線が確保しやすいコンパクトなサイズです。

本体性能

キャスター標準装備

ちょっとした移動に便利なキャスター付き。



シームレス型折れ座面


金属製の蝶番を使用していないのでサビの心配がありません。



尿の飛び散りを防ぐ「こぼれガード」


■従来のポータブルトイレは

便座とバケツの間にすきまがあり尿が前にこぼれる事があります。

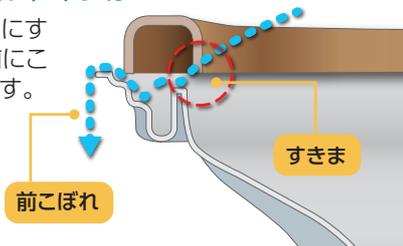

■セレクトR

【こぼれガード】付きなので、前方への尿の飛び散り、こぼれを防ぐことができます。

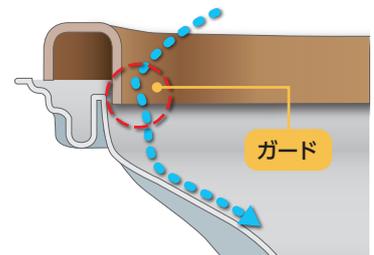

ニーズに合わせて追加できる。ソフト便座・暖房便座・快適脱臭機能

ソフト便座

おしりのやせた方、長時間着座時に最適。
やわらかくて、つめたさを感じさせない素材で、便座カバーいらず

- やわらかくて、つめたさを感じさせない素材、EVAを採用しました。
- 便座カバーをしなくても、快適にご使用いただく事ができるので、カバーの取り替えや洗濯の手間がなく、お手入れが簡単です。



- 着座中の負担をやさしく軽減する、やわらかなEVAクッション。




- 簡単に着脱できます。




- 丸洗いができます。
- 水が染みこまないので乾きやすいです。

暖房便座

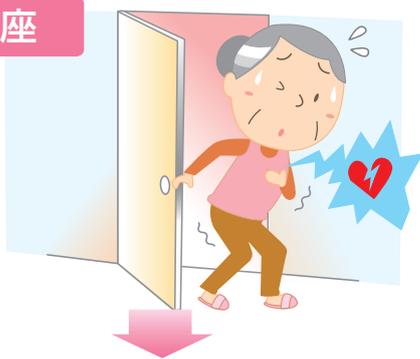

冬の冷たい便座に座ると瞬間的に体温が奪われ、脈が速くなり、血圧上昇などを引き起こし、心臓や脳に障害を起こす危険性がありますが、暖房便座を使用すると、着座時の冷たさによるショックを軽減できます。

リモコン操作の便座温度調節

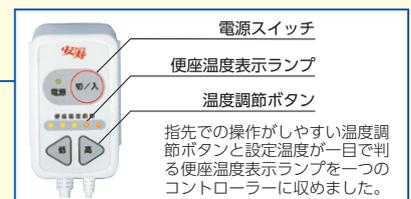

※便座温度は電源を入れてから約20分で設定温度になります。

電気代：約12円/1日


※新電力料金目安単価27円/kwhで計算

約30～40℃の範囲で5段階に調節でき、IC温度制御で適温を保ちます。

※低温やけどを防ぐには、体温よりも低い温度でご使用ください。

節水バケツ

新型節水バケツを採用。
1ℓの水で従来通り汚物をカバー。

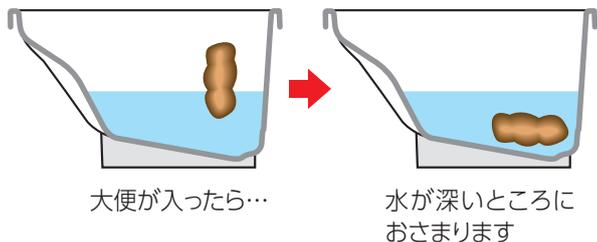

大便が入ったら…

水が深いところにおさまります


バケツ蓋

便座穴にフィット



この出っ張りが入り込み代になって…

便座の上から、しっかり蓋が出来て、におい対策になります。

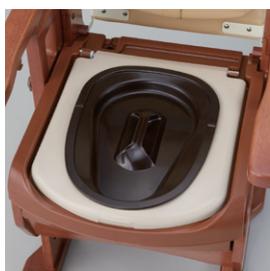

尿こぼれを防止するエロンゲート便座穴

セレクトRは、標準便座、ソフト便座、暖房便座ともにエロンゲート便座穴で尿こぼれを防止します。




見やすいバケツ蓋

見やすいバケツ蓋

■従来のポータブルトイレは



■セレクトR

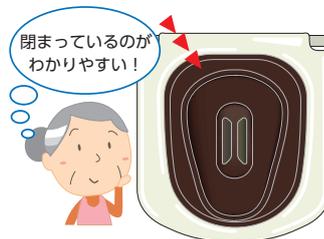

快適脱臭 センサー方式で、スイッチ操作不要

- センサー方式で、人が着座したら自動的に脱臭器が作動します。
- 人がいなくなったら、5分後に自動停止します。


赤外線センサーが人の着座をキャッチ。



- ①臭いを外に逃がさない**強力吸引**と
- ②気になるニオイを99%カットする**強力吸着**

① 強力吸引

1分間に、ドラム缶1個分の臭いを強力に吸引します。

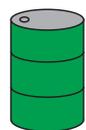

約150ℓ/分以上


ポータブルトイレを使って、ニオイがこもる理由。『排泄臭が便座の外に漏れ出て臭う』を、しっかり防ぐ、強力吸引。



② 強力脱臭

吸引した臭いは吸着材で99%以上除去します。

<イメージ図>

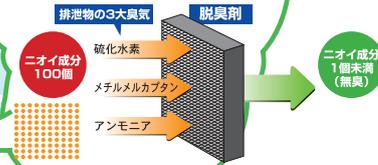

●吸着材は、1日1時間使用して約7年間交換不要です。

電気代: 約1円/1日

※新電力料金目安単価27円/kwhで計算

ゆったり座れるアーチ形状のひじかけ!



ゆったり足を広げられる
前方に支柱のないひじ掛け形状。




組立完成品

ノーマルタイプ・はねあげタイプ 共通スペック

便座高さは35cm～50cmで調節できます(3cmピッチ)



便座角度は水平と3°前傾に設定出来ます。

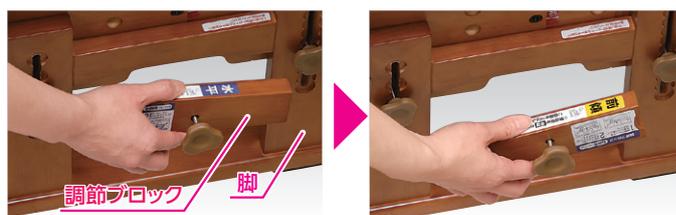

調節ブロックをひっくり返して取り付け、
脚をスライドさせるだけで便座が前傾します。

ひじかけ高さは18cm～27cmで調節できます(3cmピッチ)


着座時は…

高めに設定できるひじ掛けで、腰を深く落さなくても、後ろ手でひじ掛けを握めるので、安全に着座できます。

高めに設定したひじ掛けに前腕を乗せることで、安定した排泄姿勢を保つ事が出来ます。

【目安】
身長160cm

▼
ひじ働け高さ27cm

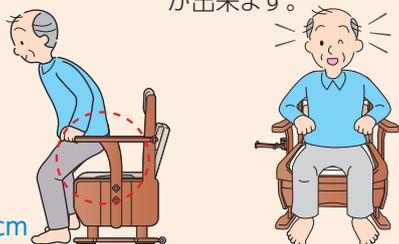


便座面を水平と前傾(3度)にカンタンに調節できます。

- ①高い座面設定の場合、立ち上がりやすくなります。
- ②前傾姿勢を取りやすくなります。前傾姿勢は、直腸と肛門の角度が広がり、排泄しやすい角度になるので、便を出しやすくなり、さらにお腹に力を入れて力みやすくなります。




はねあげ式ひじかけで、座位移乗に適した **はねあげタイプ**

ワンタッチロックで操作がしやすいひじかけ!

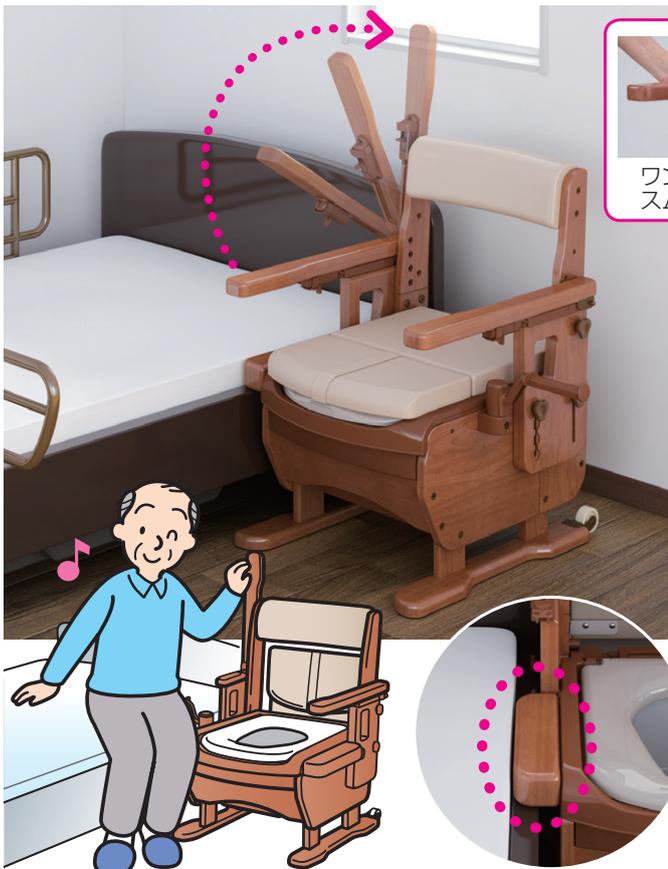

はねあげ式ひじ掛けで
移乗に便利!

移乗スペーサーが
ベッドとのすき間
を埋めます。

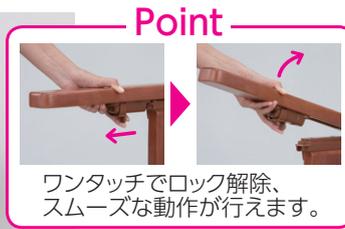

組立完成品

本体は標準幅・ワイド幅から選べます。



キャスター標準装備



設置面に跡が残りにくい大きなすべり止めの脚ゴム



省スペースに特化した コンパクトタイプ


コンパクトで、ゆったり座れるアーチ型ひじ掛け



ゆったり座れます!

ひじかけ支柱がアーチ型なので脚を広げやすい

排泄時、後始末の動作をゆったり行えます。

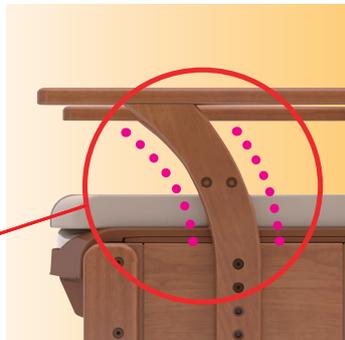


アーチ型支柱によるひじ掛け形状



組立完成品

コンパクトタイプ スペック


ひじかけ高さは18cm~27cmで調節できます(3cmピッチ)

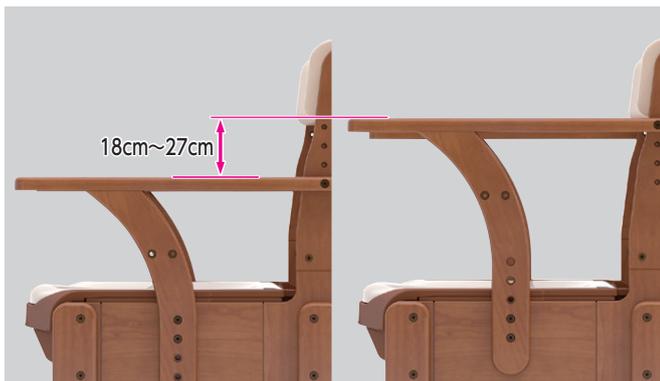

便座高さは33cm~45cmで調節できます(3cmピッチ)



全幅48cmのコンパクト設計

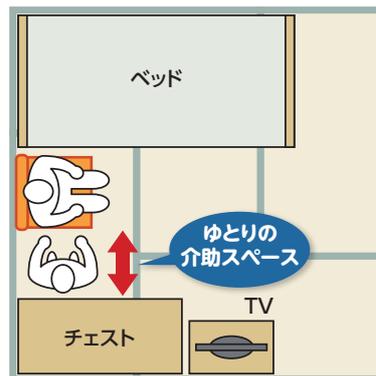


4畳半などのスペースに余裕がないお部屋でも動線が確保しやすいコンパクトなサイズです。

キャスター標準装備




ノーマル

〈標準幅タイプ〉

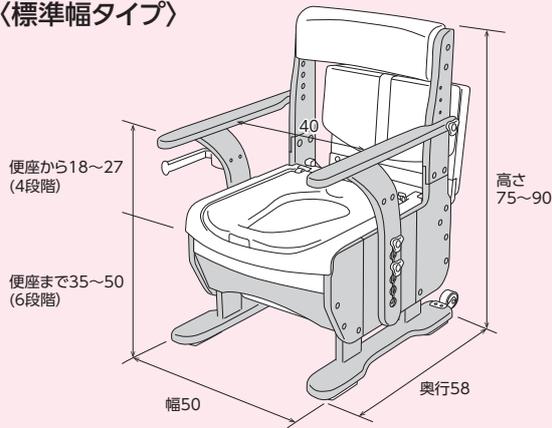


〈ワイド幅タイプ〉

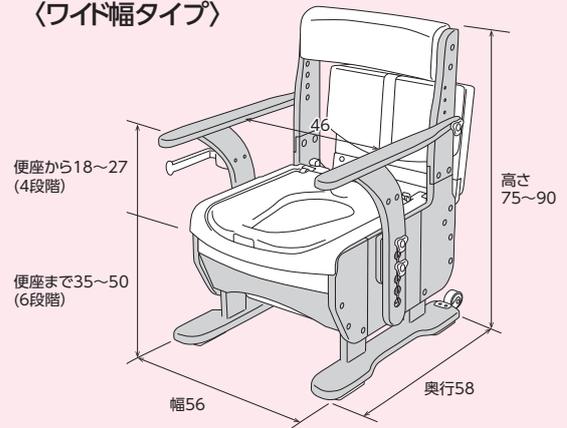


はねあげ


〈標準幅タイプ〉

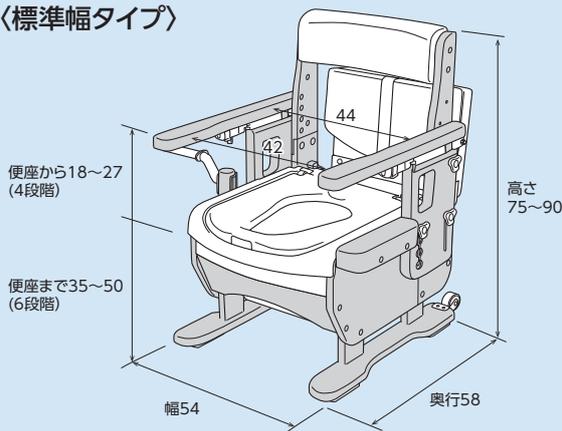

〈ワイド幅タイプ〉

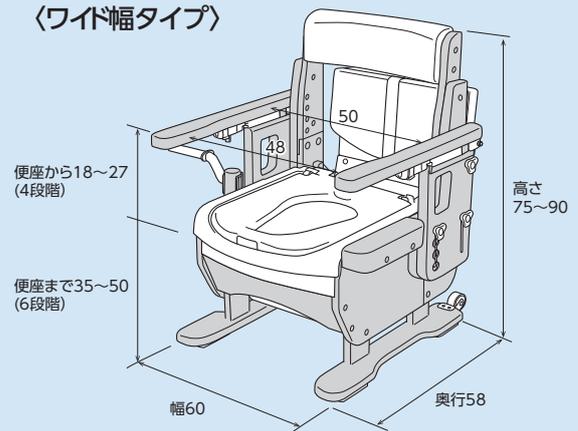


コンパクトタイプ

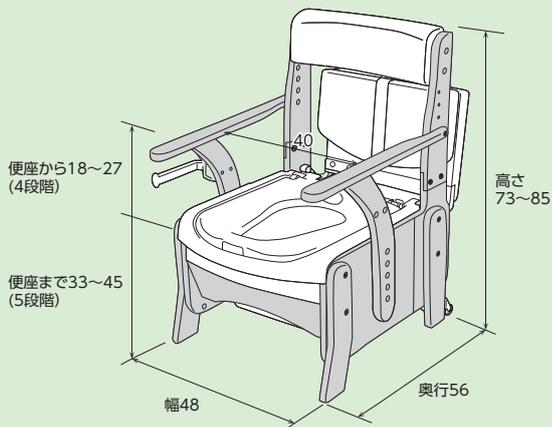


便座寸法図 (単位: cm)

〈標準便座/暖房便座/ソフト便座〉

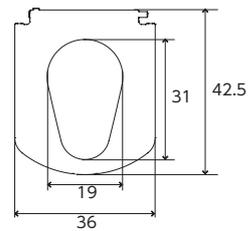

オプション寸法図 (単位: cm)

〈移乗スペーサー〉

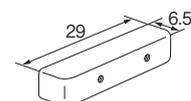

(はねあげのみ)

家具調トイレセレクトR ノーマルシリーズ

品名		部品名	材質
構成部材	全タイプ共通	構造部材	天然木(ラバーウッド)
		表面加工	ウレタン塗装
		張り材	合成皮革(PVC)
		クッション材	ウレタンフォーム
		受け板・汚水受け・バケツ	ポリプロピレン
標準便座タイプ 暖房便座タイプ 標準便座・快適脱臭タイプ 暖房便座・快適脱臭タイプ	便座	ポリプロピレン (抗菌加工)	
		ソフト便座タイプ ソフト便座・快適脱臭タイプ	便座
		便座ベース板	ポリプロピレン
バケツ容量		約9ℓ	
サイズ	ノーマル	幅50 × 奥行58 × 高さ75 ~ 90cm (便座までの高さ35 ~ 50cm [6段階])	
	ノーマルワイド	幅56 × 奥行58 × 高さ75 ~ 90cm (便座までの高さ35 ~ 50cm [6段階])	
重量		ノーマル	ノーマルワイド
	標準便座タイプ	約16.3kg	約16.7kg
	ソフト便座タイプ	約16.3kg	約16.7kg
	暖房便座タイプ	約17.0kg	約17.4kg
	標準便座・快適脱臭タイプ	約16.9kg	約17.3kg
	ソフト便座・快適脱臭タイプ	約16.9kg	約17.3kg
	暖房便座・快適脱臭タイプ	約17.6kg	約18.0kg

家具調トイレセレクトR はねあげシリーズ

品名		部品名	材質
構成部材	全タイプ共通	構造部材	天然木(ラバーウッド)
		表面加工	ウレタン塗装
		張り材	合成皮革(PVC)
		クッション材	ウレタンフォーム
		受け板・汚水受け・バケツ	ポリプロピレン
標準便座タイプ 暖房便座タイプ 標準便座・快適脱臭タイプ 暖房便座・快適脱臭タイプ	便座	ポリプロピレン (抗菌加工)	
		ソフト便座タイプ ソフト便座・快適脱臭タイプ	便座
		便座ベース板	ポリプロピレン
バケツ容量		約9ℓ	
サイズ	はねあげ	幅54 × 奥行58 × 高さ75 ~ 90cm (便座までの高さ35 ~ 50cm [6段階])	
	はねあげワイド	幅60 × 奥行58 × 高さ75 ~ 90cm (便座までの高さ35 ~ 50cm [6段階])	
重量		はねあげ	はねあげワイド
	標準便座タイプ	約19.3kg	約21.3kg
	ソフト便座タイプ	約19.3kg	約21.3kg
	暖房便座タイプ	約20.0kg	約22.0kg
	標準便座・快適脱臭タイプ	約19.9kg	約21.9kg
	ソフト便座・快適脱臭タイプ	約19.9kg	約21.9kg
	暖房便座・快適脱臭タイプ	約20.6kg	約22.6kg

家具調トイレセレクトR コンパクトシリーズ

品名		部品名	材質
構成部材	全タイプ共通	構造部材	天然木(ラバーウッド)
		表面加工	ウレタン塗装
		張り材	合成皮革(PVC)
		クッション材	ウレタンフォーム
		受け板・汚水受け・バケツ	ポリプロピレン
標準便座タイプ 暖房便座タイプ 標準便座・快適脱臭タイプ 暖房便座・快適脱臭タイプ	便座	ポリプロピレン (抗菌加工)	
		ソフト便座タイプ ソフト便座・快適脱臭タイプ	便座
		便座ベース板	ポリプロピレン
バケツ容量		約9ℓ	
サイズ		幅48 × 奥行56 × 高さ73 ~ 85cm (便座までの高さ33 ~ 45cm [3cmピッチ] [5段階])	
重量	標準便座タイプ	約14.0kg	
	ソフト便座タイプ	約14.0kg	
	暖房便座タイプ	約14.7kg	
	標準便座・快適脱臭タイプ	約14.6kg	
	ソフト便座・快適脱臭タイプ	約14.6kg	
	暖房便座・快適脱臭タイプ	約15.3kg	

家具調トイレ セレクトRシリーズ 共通部仕様表

■暖房便座タイプ

材質	便座・裏板	ポリプロピレン
	スイッチボックス・ホルダー	ABS樹脂
定格	(電源電圧)入力: AC100V・50/60Hz	
消費電力	約53W	
表面温度	温度調節範囲約30~40℃	
発熱体	コードヒーター	
コード長	本体側約0.9m、電源側約1.6m	
安全装置	温度ヒューズ	

■暖房・脱臭便座タイプ

定格	(電源電圧)入力: AC100V・50/60Hz 出力: DC12V (付属脱臭器専用)	
消費電力	暖房:約53W/脱臭:約5W	
コード長	暖房便座: 本体側約0.9m、電源側約1.6m 脱臭器: 約0.9m	

※その他の項目は、「暖房便座タイプ」および「快適脱臭タイプ」をご参照ください。

■快適脱臭タイプ

材質	脱臭器本体	ポリプロピレン
	接続ダクト	ポリエチレン
	プレフィルター	ポリウレタン
	吸着材	触媒配合コルゲートハニカム活性炭
サイズ	幅13.5 × 奥行9.5 × 高さ22cm	
定格	(ACアダプター)入力: AC100V・50/60Hz 出力: DC12V	
消費電力	約5W	
脱臭方法	吸着脱臭方式	
吸着材寿命	約7年(1日1時間使用した場合)	
動作	人体を感知し自動的に起動、最終感知から5分後に停止	
コード長	約1.9m	

※材質名はそれぞれPVC=塩化ビニル樹脂、EVA=エチレン酢酸ビニル共重合樹脂を表しています。

家具調トイレ セレクトRシリーズ 新旧対照表

タイプ	商品コード	商品名	商品コード	価格			
ノーマルタイプ	ノーマル(L)	L〈標準便座〉	533-350	⇒〈標準便座〉	533-850	51,000円(税抜)	家具調セレクトRノーマル
	ノーマル(H)	H〈標準便座〉	533-360				
		L〈ソフト便座〉	533-351	⇒〈ソフト便座〉	533-851	57,000円(税抜)	
		H〈ソフト便座〉	533-361				
		L〈暖房便座〉	533-352	⇒〈暖房便座〉	533-852	66,500円(税抜)	
		H〈暖房便座〉	533-362				
		L〈標準・快適脱臭〉	533-353	⇒〈標準・快適脱臭〉	533-853	74,000円(税抜)	
		H〈標準・快適脱臭〉	533-363				
		L〈ソフト・快適脱臭〉	533-354	⇒〈ソフト・快適脱臭〉	533-854	80,000円(税抜)	
		H〈ソフト・快適脱臭〉	533-364				
ノーマルワイドタイプ	ノーマルワイド(L)	L〈標準便座〉	533-370	⇒〈標準便座〉	533-856	56,000円(税抜)	家具調セレクトRノーマルワイド
	ノーマルワイド(H)	H〈標準便座〉	533-380				
		L〈ソフト便座〉	533-371	⇒〈ソフト便座〉	533-857	62,000円(税抜)	
		H〈ソフト便座〉	533-381				
		L〈暖房便座〉	533-372	⇒〈暖房便座〉	533-858	71,500円(税抜)	
		H〈暖房便座〉	533-382				
		L〈標準・快適脱臭〉	533-373	⇒〈標準・快適脱臭〉	833-859	79,000円(税抜)	
		H〈標準・快適脱臭〉	533-383				
		L〈ソフト・快適脱臭〉	533-374	⇒〈ソフト・快適脱臭〉	533-860	85,000円(税抜)	
		H〈ソフト・快適脱臭〉	533-384				
はねあげタイプ	はねあげ(L)	L〈標準便座〉	533-750	⇒〈標準便座〉	533-865	63,000円(税抜)	家具調セレクトRはねあげ
	はねあげ(H)	H〈標準便座〉	533-760				
		L〈ソフト便座〉	533-751	⇒〈ソフト便座〉	533-866	69,000円(税抜)	
		H〈ソフト便座〉	533-761				
		L〈暖房便座〉	533-752	⇒〈暖房便座〉	533-867	78,500円(税抜)	
		H〈暖房便座〉	533-762				
		L〈標準・快適脱臭〉	533-753	⇒〈標準・快適脱臭〉	533-868	86,000円(税抜)	
		H〈標準・快適脱臭〉	533-763				
		L〈ソフト・快適脱臭〉	533-754	⇒〈ソフト・快適脱臭〉	533-869	92,000円(税抜)	
		H〈ソフト・快適脱臭〉	533-764				
はねあげワイドタイプ	はねあげワイド(L)	L〈標準便座〉	533-770	⇒〈標準便座〉	533-871	68,000円(税抜)	家具調セレクトRはねあげワイド
	はねあげワイド(H)	H〈標準便座〉	533-780				
		L〈ソフト便座〉	533-771	⇒〈ソフト便座〉	533-872	74,000円(税抜)	
		H〈ソフト便座〉	533-781				
		L〈暖房便座〉	533-772	⇒〈暖房便座〉	533-873	83,500円(税抜)	
		H〈暖房便座〉	533-782				
		L〈標準・快適脱臭〉	533-773	⇒〈標準・快適脱臭〉	533-874	91,000円(税抜)	
		H〈標準・快適脱臭〉	533-783				
		L〈ソフト・快適脱臭〉	533-774	⇒〈ソフト・快適脱臭〉	533-875	97,000円(税抜)	
		H〈ソフト・快適脱臭〉	533-784				
コンパクトタイプ		〈標準便座〉	533-670	⇒〈標準便座〉	533-880	36,000円(税抜)	家具調セレクトRコンパクト
		〈ソフト便座〉	533-672	⇒〈ソフト便座〉	533-881	42,000円(税抜)	
		〈暖房便座〉	533-674	⇒〈暖房便座〉	533-882	51,500円(税抜)	
		〈標準・快適脱臭〉	533-676	⇒〈標準・快適脱臭〉	533-883	59,000円(税抜)	
		〈ソフト・快適脱臭〉	533-678	⇒〈ソフト・快適脱臭〉	533-884	65,000円(税抜)	
		〈暖房・快適脱臭〉	533-680	⇒〈暖房・快適脱臭〉	533-885	74,000円(税抜)	

※家具調トイレコンパクト(標準便座)は継続販売いたしません。

家具調トイレ セレクトRシリーズ 早見表

特定福祉用具
特定介護予防福祉用具

最大使用者体重
100kg

タイプ	商品名	商品コード	JANコード	価格	重量	サイズ(単位:cm)
ノーマルタイプ	 組立完成品	〈標準便座〉	533-850	4970210853979	51,000円(税抜)	約16.3kg
		〈ソフト便座〉	533-851	4970210853986	57,000円(税抜)	約16.3kg
		〈暖房便座〉	533-852	4970210853993	66,500円(税抜)	約17.0kg
		〈標準・快適脱臭〉	533-853	4970210854006	74,000円(税抜)	約16.9kg
		〈ソフト・快適脱臭〉	533-854	4970210854013	80,000円(税抜)	約16.9kg
		〈暖房・快適脱臭〉	533-855	4970210854020	89,000円(税抜)	約17.6kg
ノーマルタイプ	 組立完成品	〈標準便座〉	533-856	4970210854037	56,000円(税抜)	約16.7kg
		〈ソフト便座〉	533-857	4970210854044	62,000円(税抜)	約16.7kg
		〈暖房便座〉	533-858	4970210854051	71,500円(税抜)	約17.4kg
		〈標準・快適脱臭〉	533-859	4970210854068	79,000円(税抜)	約17.3kg
		〈ソフト・快適脱臭〉	533-860	4970210854075	85,000円(税抜)	約17.3kg
		〈暖房・快適脱臭〉	533-861	4970210854082	94,000円(税抜)	約18.0kg
はねあげタイプ	 組立完成品	〈標準便座〉	533-865	4970210854099	63,000円(税抜)	約19.3kg
		〈ソフト便座〉	533-866	4970210854105	69,000円(税抜)	約19.3kg
		〈暖房便座〉	533-867	4970210854112	78,500円(税抜)	約20.0kg
		〈標準・快適脱臭〉	533-868	4970210854129	86,000円(税抜)	約19.9kg
		〈ソフト・快適脱臭〉	533-869	4970210854136	92,000円(税抜)	約19.9kg
		〈暖房・快適脱臭〉	533-870	4970210854143	101,000円(税抜)	約20.6kg
はねあげタイプ	 組立完成品	〈標準便座〉	533-871	4970210854150	68,000円(税抜)	約21.3kg
		〈ソフト便座〉	533-872	4970210854167	74,000円(税抜)	約21.3kg
		〈暖房便座〉	533-873	4970210854174	83,500円(税抜)	約22.0kg
		〈標準・快適脱臭〉	533-874	4970210854181	91,000円(税抜)	約21.9kg
		〈ソフト・快適脱臭〉	533-875	4970210854198	97,000円(税抜)	約21.9kg
		〈暖房・快適脱臭〉	533-876	4970210854204	106,000円(税抜)	約22.6kg
コンパクトタイプ	 組立完成品	〈標準便座〉	533-880	4970210854211	36,000円(税抜)	約14.0kg
		〈ソフト便座〉	533-881	4970210854228	42,000円(税抜)	約14.0kg
		〈暖房便座〉	533-882	4970210854235	51,500円(税抜)	約14.7kg
		〈標準・快適脱臭〉	533-883	4970210854242	59,000円(税抜)	約14.6kg
		〈ソフト・快適脱臭〉	533-884	4970210854259	65,000円(税抜)	約14.6kg
		〈暖房・快適脱臭〉	533-885	4970210854266	74,000円(税抜)	約15.3kg

※介護保険を利用される方は事前にご担当の介護支援専門員(ケアマネジャー)等へご相談ください。
 ※JANコードの国名およびメーカーコードを表わす49-70210は共通です。



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

ご注文及び在庫に関するお問い合わせは

東京支店 ☎(03)3502-1422 仙台支店 ☎(022)291-5475
 大阪支店 ☎(06)6448-5127 広島支店 ☎(082)245-7100
 名古屋支店 ☎(052)203-0396 札幌営業所 ☎(011)709-6011
 福岡支店 ☎(092)741-1411 企画グループ ☎(03)3502-1448

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- このカタログの商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル ☎0120-86-7735
 (受付時間) 祝祭日以外の月～金 9:00～17:00 (12:00～13:00はのぞく)

■お問い合わせは…