



「やりたい」を
「できる」に変えよう。

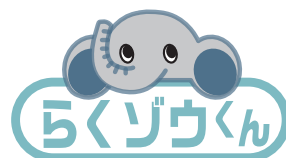

座面にも
座れる
樹脂製ポータブルトイレFX-30に
座面付が新登場!

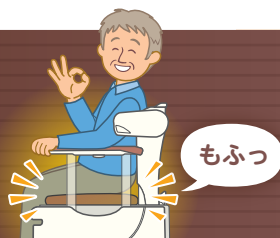


こんなお困り事、ありませんでしたか？

つい蓋の上に
座ってしまい、
蓋が割れて
しまう…



寝室が狭くて
ポータブルトイレと
椅子を両方
置くスペースがない…

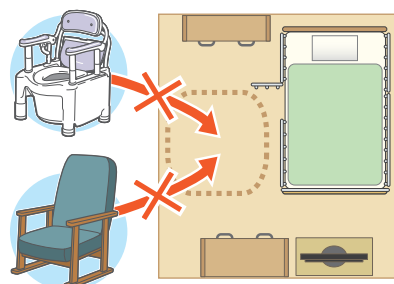

それ、ポータブルトイレ FX-30座面付で解決できます！

椅子
として

耐荷重100kgの座面の上に
座れるから安心！



一台でトイレとして、椅子として
使えるから省スペース



トイレ
として



ひじ掛けや側方ガードで
座位が安定



色はFX-30シリーズで人気のアースブラウン
お部屋に馴染む自然な色合いです♪



ポータブルトイレ FX-30 シリーズ共通特長

ワンタッチ調節で移乗しやすいひじ掛け

ノーマルポジション


0cm、6～24cm(8段階)

0cmにすることで、座位移乗がスムーズ。



ひじ掛け高さワンタッチ調節

ロック解除ボタンを押しながら調節ボタンを押すと上下にスライドします。

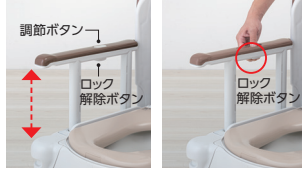

分かりやすい簡単操作

ワンタッチ高さ調節

便座高さワンタッチ調節 + ガタツキ防止

便座高さ35～49cm(15段階)
脚部固定ナットをゆるめ、調節ボタンを押すと脚が上下にスライドでき、短時間で調節できます。



さらに

前脚のアジャスターで多少の凹凸のある床でもガタツキなく設置できます。



片手で紙が切れる

片手ペーパーホルダーR

ペーパーの量が少なくなっても「ピタスパカッター」で最後までしっかりカット。

手が届きやすい位置や角度に調節できます。



ベッド柵にも取り付けできます。
※別途、市販のS字フックをご用意ください。

スムーズな排泄を促す

姿勢保持グリップ

前傾姿勢を取ることで腹圧がかかり排泄を促します。姿勢保持グリップを握ると自然と前傾姿勢を取ることができます。



身体の支えに

側方ガード

片麻痺の方の身体を支え、安心してひじ掛け昇降動作ができます。また、お尻を拭くなど、排泄の一連動作での不意な身体の傾きを防げます。



後始末や掃除がしやすくなった

節水バケツ

● 節水で軽い



少ない水で運ぶのが楽々。



● 柄がロック



柄を持ち上げただけでロックするのでトイレまでの運搬が安定します。

● 洗しやすい


バケツ底部が丸いので、水を流しやすく洗しやすい。

キャスター



キャスターは標準装備。ちょっとした移動に便利。

便座から
ノーマルポジション:
0・6～24
ハイポジション:
6・12～30
(各設定8段階)
便座まで35～49
(15段階)

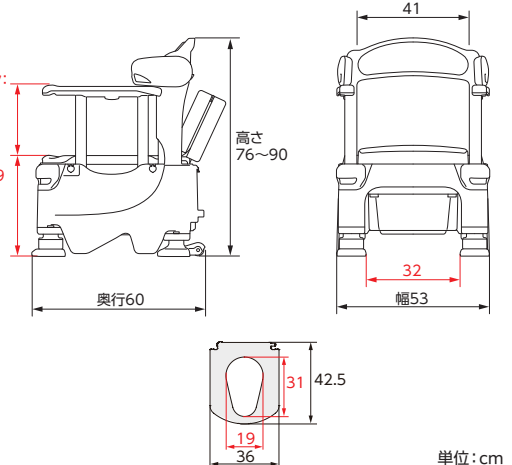

単位:cm

バケツ容量	約9L
材質	(本体・バケツ・ひじ掛け)PP (前脚)ABS (背もたれクッション)PE (座面)合成皮革[PVC]、ウレタンフォーム
梱包入数	1
付属品	防臭消耗品(試供品)、 KN吸着便座シート(標準便座のみ)

	カラー	商品コード	JANコード	TAISコード	価格	重量(kg)	サイズ
標準便座	アースブラウン	532-980	290460	000743	46,500円(税込 51,150円)	約14.0	幅53× 奥行60× 高さ76～90cm
ソフト便座		532-981	290477	000744	52,500円(税込 57,750円)		

※ JANコードの国名およびメーカーコードを表わす49-70210は共通です。TAISコードのメーカーコードを表わす00221は共通です。

TOAGOSEI グループ



アロン化成株式会社

ライフサポート事業部

〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 住友不動産日比谷ビル8階

製品に関するご意見・お問い合わせは

お客様相談室 フリーダイヤル 0120-86-7735
(受付時間) 祝祭日以外の月～金 10:00～16:00(12:00～13:00はのぞく)

- お客様からいただいたお電話は、内容確認のため、録音させていただきます。
- 個人情報情報は適切に管理し、修理やご相談への回答などの情報提供のみに利用いたします。



公式ホームページ
アロン化成【安海】



公式チャンネル
アロン化成【安海】



@aron_anjyu



@aron_anjyu

- 記載価格はメーカー希望小売価格です。
- 商品写真の色は、印刷物ですので現物とは多少違うことがあります。
- 製品の仕様および価格は予告なく変更する場合があります。

■ お問い合わせは…